

Réussir votre transition Dexcom G6 > Dexcom G7

avec Omnipod® 5


Le capteur Dexcom G7 est désormais disponible et s'intègre avec le système d'administration automatisée d'insuline Omnipod® 5.

Pour un patient déjà équipé d'Omnipod® 5, la transition du Dexcom G6 vers le Dexcom G7 ne nécessite pas de Demande d'Accord Préalable, une ordonnance suffit.

Matériel prérequis à la transition

Contrôleur Omnipod® 5 mis à jour

Une connexion Wi-Fi est requise pour mettre à jour le contrôleur

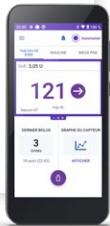

Nouveaux pods Omnipod® 5 compatibles

La mention Dexcom G7 doit apparaître sur la boîte et l'emballage individuel du pod



Smartphone compatible avec l'application Dexcom G7

Si l'application apparaît dans l'App Store ou sur Google Play, le téléphone est compatible



Capteur Dexcom G7



1 Mise à jour du contrôleur Omnipod® 5

Avant le lancement de Dexcom G7, une notification automatique proposera aux utilisateurs de mettre à jour leur contrôleur Omnipod® 5. Cette **mise à jour, indispensable pour utiliser un capteur Dexcom G7 avec la pompe Omnipod® 5**, sera d'abord facultative : si elle n'est pas réalisée, la notification réapparaîtra toutes les 72h.

- ➡ Une fois la mise à jour complétée, l'option Dexcom G7 apparaîtra lors de l'appairage d'un nouveau capteur avec le système Omnipod® 5.



Pour effectuer la mise à jour, connectez le contrôleur au Wi-Fi, assurez-vous d'avoir au moins 15% de batterie, puis suivez les instructions à l'écran.

2 Installation et initialisation de l'application Dexcom G7

1. Téléchargez et ouvrez l'application Dexcom G7.
2. Connectez-vous avec vos identifiants Dexcom existants.

Vous conservez le même compte Dexcom entre G6 et G7, utilisez les mêmes identifiant et mot de passe pour vous connecter.

Scannez ce QR code pour télécharger l'application



3. Démarrez votre capteur via l'application Dexcom G7 en suivant les instructions données dans l'application.


3

Appairage du premier capteur Dexcom G7 avec le contrôleur Omnipod® 5

1. Sur votre contrôleur à jour, au moment de l'appairage du capteur, allez dans le menu « Gérer le capteur »
2. Choisissez Dexcom G7 comme capteur
3. Suivez les informations à l'écran pour appairer votre capteur Dexcom G7 au contrôleur Omnipod® 5

Dexcom G7 peut être appairé au contrôleur Omnipod® 5 de 2 façons :


Soit avec le QR code

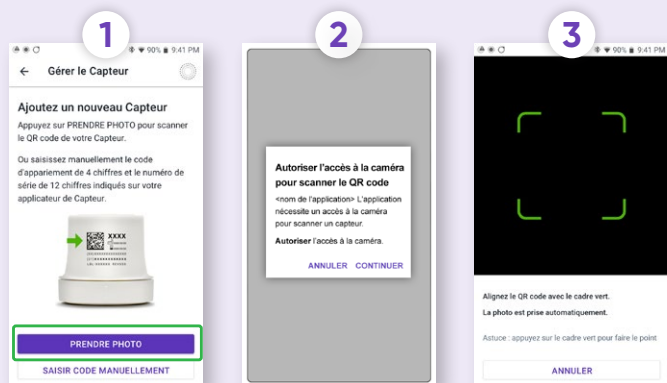

Cliquez sur « Prendre photo »

Autorisez l'accès à la caméra

Scannez le QR code*

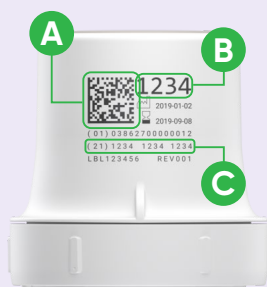

A QR code

B Code du capteur

C Numéro de série

*la photo ne sera pas stockée

Soit avec le code du capteur et le numéro de série



Cliquez sur « Saisir le code manuellement »

Saisissez le code d'appariement du capteur

Confirmez le code

Saisissez le numéro de série

Confirmez le numéro de série



Le système est maintenant prêt à démarrer !